



16770047

NL Massagepistol.....



INLEIDING

Lees deze instructies zorgvuldig door voordat je je nieuwe massagepistool voor de eerste keer gebruikt, zodat je er optimaal profijt van hebt.

Besteed bijzondere aandacht aan de veiligheidsinstructies. We raden u ook aan deze instructies te bewaren voor toekomstig gebruik.

VEILIGHEID INSTRUCTIES

- Dit apparaat mag alleen worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of met gebrek aan ervaring en kennis, als zij onder toezicht staan of instructies hebben ontvangen over hoe het apparaat veilig te gebruiken en als zij de risico's begrijpen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Reiniging en onderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.
- Laat het apparaat nooit onbeheerd achter wanneer het in gebruik is. Houd toezicht op kinderen in de buurt van het apparaat wanneer het in gebruik is.
- Het apparaat is geen speelgoed.
- Verkeerd gebruik van het apparaat kan letsel of schade veroorzaken.
- Gebruik het apparaat alleen waarvoor het bedoeld is. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor letsel of schade als gevolg van onjuist gebruik of onjuiste behandeling (zie ook garantievoorwaarden).
- Alleen voor huishoudelijk gebruik. niet voor buitengebruik of commercieel gebruik.
- Verwijder alle verpakking en transportmateriaal van binnen en buiten het apparaat.
- Controleer of er geen zichtbare schade is aan het apparaat en of er geen onderdelen ontbreken.
- Controleer of het niet mogelijk is om te struikelen over de USB-kabel op het apparaat terwijl het wordt opgeladen.
- Schakel het apparaat uit voordat u het schoonmaakt en wanneer u het niet gebruikt.

- Houd de USB-kabel en het apparaat uit de buurt van warmtebronnen, hete voorwerpen en open vuur.
- De USB-kabel mag niet gedraaid of rond het apparaat gewikkeld zijn.
- Gebruik het apparaat niet als het op de grond of in het water is gevallen of als het op een of andere manier beschadigd is.
- Het apparaat kan alleen worden aangesloten op een 5V USB-stroombron met behulp van de meegeleverde USB-kabel.
- De garantie vervalt als het apparaat wordt aangesloten op een onjuist voltage.
- Probeer het apparaat nooit zelf te repareren.
Neem voor reparaties onder garantie contact op met de winkel waar u het apparaat hebt gekocht.
- Ongeoorloofde reparaties of wijzigingen maken de garantie ongeldig.
- Gebruik geen accessoires of reserveonderdelen die niet door de leverancier zijn geleverd.
- Niet in bad gebruiken.
- Plaats het apparaat nooit op een plek waar het kan vallen of beschadigd kan raken.
- Het gebruik van dit apparaat vervangt niet de tussenkomst van een fysiotherapeut of een kinesist.
- Gebruik het apparaat niet te lang, omdat dit kan leiden tot oververhitting en een kortere levensduur. Als het apparaat oververhit raakt, schakel het dan onmiddellijk uit en laat het volledig afkoelen.


MEDISCHE WAARSCHUWINGEN

- Het apparaat is niet ontworpen voor fysiotherapeutische behandeling, maar uitsluitend voor "welzijn", massage, ontspanning van gespannen spieren en/of verlichting van spierpijn.
- Raadpleeg uw arts als u twijfelt over uw gezondheidstoestand voordat u het apparaat gebruikt.
- Het apparaat mag niet worden gebruikt door mensen met pacemakers.
- Het apparaat mag niet worden gebruikt door mensen met hartproblemen of pijn van onbekende oorsprong, of tijdens de zwangerschap.
- Gebruik het apparaat niet als u pijnstillers, ontspannende middelen of alcohol gebruikt, omdat uw tolerantie voor warmte dan verminderd kan zijn.

- Gebruik het apparaat niet in de nek of op gevoelige plekken.
- Gebruik het apparaat niet rechtstreeks op gezwollen, ontstoken of beschadigde huid.
- Niet gebruiken in combinatie met oliën, crèmes of andere producten.
- Gebruik het apparaat niet vlak voor het slapengaan, omdat het een stimulerend effect heeft waardoor u moeilijk in slaap kunt vallen.
- Gebruik het apparaat niet te lang op hetzelfde lichaamsdeel; beweeg het apparaat in één continue beweging over een groter deel van het lichaam.


BELANGRIJKSTE ONDERDELEN

1. Handgreep
2. Contactdoos
3. Massagekop
4. Bedieningspaneel
5. Controlelampjes
6. Aan/uit-knop met snelheidskeuzeschakelaar
7. oplaadconnector

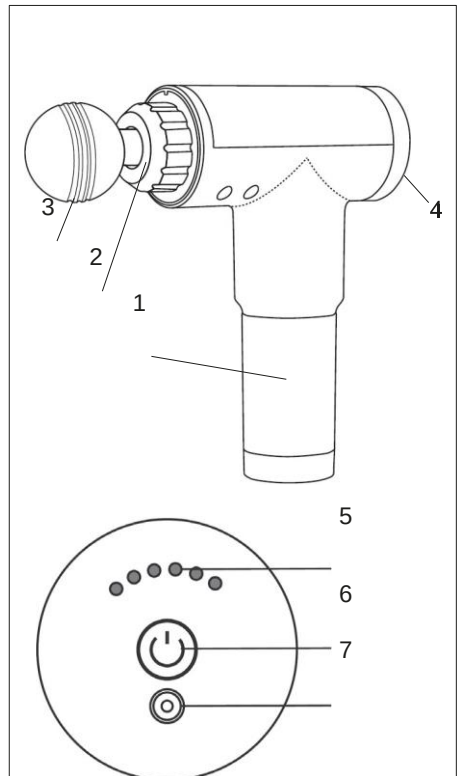

Massagekoppen

- A. Ronde massagekop voor grote spierzones, handen, rug, billen en benen
- B. Bolvormige massagekop voor diepe weefselmassages en massage van de gewrichten, handpalmen en voetzolen
- C. Platte massagekop voor alle spierzones en spierontspanning
- D. Vorkvormige massagekop voor achillespezen en nek- en wervelkolomspieren

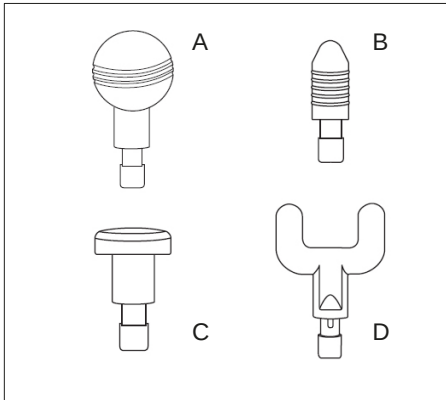


LADEN

Steek de meegeleverde USB-kabel in de oplaadconnector (7) van het apparaat en steek de USB stekker in het stopcontact. Volledig opladen duurt ongeveer 3 uur en biedt 60 minuten werking.

GEBRUIK

Het apparaat helpt de bloedsomloop te verhogen, spierpijn te verminderen en het herstel na het sporten te bevorderen.

1. Bevestig de gewenste massagekop (3, A/B/C/D) naar de aansluiting (2) op het apparaat:

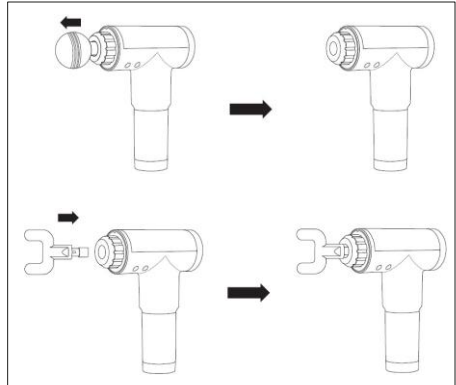

2. Schakel het apparaat in door op de start/stop-toets (6) te drukken. Het apparaat start op de laagste snelheid en de indicatielampjes (5) geven aan welke snelheid geselecteerd is.
3. Druk een of meerdere keren op de aan/uit-knop om de snelheidsinstelling te wijzigen of het apparaat uit te schakelen:

Aantal personen	Impacts / minuut	Geluids niveau
1	2000	43 dB
2	2200	45 dB
3	2400	45.6 dB
4	2600	46.2 dB
5	2800	47 dB
6	3000	47.5 dB
7	0	0 dB

*gemeten op een afstand van 1 meter

4. Houd de massagekop (3) stevig tegen de huid door het handvat (1) vast te pakken.
5. Schakel het apparaat na gebruik altijd uit met de aan/uit-knop (6).

SCHOONMAKEN

- Het apparaat mag nooit worden blootgesteld aan of ondergedompeld worden in water.
- Gebruik geen schuurpoeder, staalwol of andere agressieve schoonmaakmiddelen om het apparaat schoon te maken, aangezien deze krassen kunnen maken op het oppervlak.
- Gebruik in plaats daarvan een zachte, vochtige doek om het apparaat schoon te maken.
- De afneembare massage koppen kunnen worden gewassen in een heet sopje.
- Zorg ervoor dat ze volledig droog zijn voordat je ze terugplaatst op het apparaat.

INFORMATIE OVER VERWIJDERING EN RECYCLING VAN DIT PRODUCT

Let op: dit product is gemarkeerd met dit symbool:



Dit betekent dat dit product niet met het gewone huishoudelijke afval mag worden weggegooid, aangezien elektrisch en elektronisch afval apart moet worden weggegooid.

Volgens de AEEA-richtlijn moet elke lidstaat zorgen voor de juiste inzameling, terugwinning, verwerking en recycling van elektrisch en elektronisch afval. Huishoudens in de EU kunnen gebruikte apparatuur gratis naar speciale recyclingcentra brengen.

In bepaalde lidstaten mag u in bepaalde gevallen gebruikte apparatuur inleveren bij de detailhandelaar die deze apparatuur aan u heeft verkocht, als u nieuwe apparatuur koopt, of bij de detailhandelaar die deze apparatuur aan u heeft verkocht, als u nieuwe apparatuur koopt. Neem contact op met uw detailhandelaar, distributeur of gemeentelijke autoriteiten voor meer informatie over de verwerking van elektrisch en elektronisch afval.