


Alecto® BC-19



- 1: czujnik temperatury
2: wyświetlacz
3: przycisk ON / Start / stop / pamięć / OFF

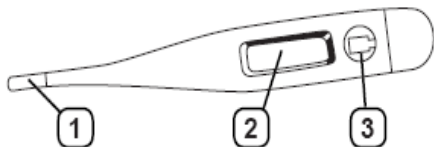

wyświetlacz temperatury



pamięć wyświetlania temperatury



bateria pusta

WPROWADZENIE

Alecto BC-19 jest cyfrowym termometrem opracowanym w celu jak najprostszego i dokładniejszego pomiaru temperatury. W celu uzyskania najbardziej wiarygodnych wyników, należy dokładnie przestrzegać instrukcji. Aby uzyskać najdokładniejszy odczyt temperatury, zalecamy używanie termometru doodbytniczo. Chociaż ogólnie akceptowana „normalna” temperatura wynosi 37,0 ° C, temperatura ciała może wahać się od 36,1 ° C do 37,2 ° C. Wahania temperatury mogą wynikać z aktywności takich jak sport, palenie tytoniu, jedzenie i picie, a także mogą być zależne na części ciała, w której mierzona jest

temperatura. Przy pomiarze ustnym temperatura ciała jest na ogół o 0,5 ° C niższa niż przy pomiarze doodbytniczym, podczas gdy temperatura mierzona pod pachą jest o 1,0 ° C niższa. Twoja temperatura jest niższa rano niż wieczorem.

SPECYFIKACJE

Zakres temperatur: 32,0 ° C - 42,9 ° C

Wyświetlacz niskiej temperatury:

temperatura ≤ 32 ° C, wyświetlacz: Lo ° C

Wyświetlacz wysokiej temperatury:

temperatura $\geq 42,9$ ° C, wyświetlacz: HI ° C

Rozdzielczość wyświetlacza: 0,1 ° C

Dokładność: 35,5 ° C - 42,9 ° C: $\pm 0,1$ ° C

$\leq 35,5$ ° C ≥ 42 ° C: $\pm 0,2$ ° C

Normalna temperatura $\leq 37,8$ ° C:

10 sygnałów dźwiękowych

Alarm gorączki $\geq 37,8$ ° C:

10 x 3 sygnały dźwiękowe

Automatyczne wyłączenie:

10 minut $\pm$ 2 minuty

Bateria: LR41, 192 lub Sr41

Pobór mocy: 0,15 mW

Żywotność baterii: 2 lata

Wymiary: 136 x 22 x 14,5 mm

Waga: ± 14 gr (łącznie z bat.)

Warunki użytkowania:

Temperatura: 10 ° C - 35 ° C

Wilgotność: 25% - 80% RH

Warunki przechowywania:

Temperatura: -25 ° C - 55 ° C

Wilgotność: 25% -80% RH

POMIAR TEMPERATURY

1. Naciśnij raz przycisk ON / OFF., aby aktywować termometr. Usłyszysz sygnał dźwiękowy.
2. Wyświetlacz pokazuje kolejno: "188,8 ° C" ostatnia zmierzona temperatura "37, 0" (dla kalibracji wewnętrznej) "LO" i migające "°C" (*)
3. Umieść termometr w wybranej części ciała, aby zmierzyć temperaturę.
4. Gdy usłyszysz sygnały dźwiękowe, temperatura została zarejestrowana.
 - jeśli temperatura ciała jest normalna, usłyszysz 10 sygnałów dźwiękowych
 - jeśli temperatura ciała jest wyższa niż normalna ($\geq 37,8$ ° C), usłyszysz 10 x 3 sygnały dźwiękowe.
5. Naciśnij przycisk ON / OFF, aby wyłączyć termometr. (Termometr wyłączy się automatycznie po około 10 minutach).

*: Jeśli temperatura w pomieszczeniu jest wyższa niż 32,0 ° C, zamiast „Lo” zostanie wyświetlona temperatura pokojowa.

CE
Deklaracja zgodności jest dostępna
w: <http://DOC.hesdo.com/BC-19-DOC.pdf>

Pomiar pod językiem:

Umieść miernik pod językiem, jak najdalej w lewo lub w prawo.

Temperatura mierzona pod językiem jest o ok. 0,5 ° C niższa niż w przypadku pomiaru doodbytniczego.

Pomiar pod pachą

Upewnij się, że pachy są suche i umieść termometr pod pachą. Czujnik musi dotykać skóry. Trzymaj rękę skrzyżowaną przed klatką piersiową. Temperatura mierzona w ten sposób jest o ok. 1,0 ° C niższa niż w przypadku pomiaru doodbytniczego.

Pomiar doodbytniczy

Wsuń delikatnie czujnik termometru (maksymalnie 1,25 cm).

NISKI POZIOM BATERII



Baterii nie można wymienić.
Proszę wymienić cały termometr.

UTYLIZACJA URZĄDZENIA

Pod koniec cyklu życia produktu nie należy wyrzucać go do zwykłych domowych śmieci, ale zanieść go do punktu zbiórki w celu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

ZALECENIA I OSTRZEŻENIA

- Trzymaj termometr i baterię poza zasięgiem dzieci.
- Nie rozmawiaj ani nie chodź podczas mierzenia temperatury.
- Przechowuj termometr w specjalnym pudełku.
- Nie wystawiaj termometru na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, kurzu lub wilgoci.
- Nie demontuj termometru.

PRZECHOWYWANIE I CZYSZCZENIE

Wyczyść termometr przed i po użyciu, używając miękkiej szmatki i alkoholu lub zimnej wody z mydłem. Termometr można na krótko zanurzyć w wodzie lub alkoholu (nie moczyć ani sterylizować). Przechowuj termometr w specjalnym pudełku.